

Rotadent 
ROTATING INSTRUMENTS
We bring good *shapes* to life



Procodile Q. Evoluce ve flexibilitě



www.ich-bin-endo.de

Brasseler , Komet , Art2 , CeraBur , CeraCut ,
CeraDrill , CeraFusion , CeraPost , DC1 , DCTherm ,
Derminator , FastFile , F360 , F6 SkyTaper , H4MC ,
OccluShaper , OptiPost , PolyBur , PrepMarker ,
Procodile , R6 ReziFlow , TissueMaster , TMC ,
TissueMaster Concept und Visio-Soft sind eingetragene
Marken der Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

ReFlex a EndoPilot jsou registrované ochranné
známky společnosti Schlumbohm GmbH & Co. KG


Některé produkty a označení uvedené v textu jsou chráněny
zákonem o ochranných známkách, patentech a autorských
právech.

Absence zvláštního odkazu nebo symbolu © by neměla být
chápana tak, že neexistuje žádná právní ochrana.

Toto dílo je chráněno autorským právem. Všechna práva,
včetně práv na překlad, dotisk a rozmnožování, včetně jejich
částí, jsou vyhrazena. Žádná část díla nesmí být
reprodukována v jakékoli formě (fotokopie, mikrofilm nebo
jakýkoli jiný proces) nebo zpracovávána pomocí elektronických
systémů bez písemného souhlasu vydavatele.

Změny produktu a barev a potisku
vyhrazeny.

Stav: prosinec 2021

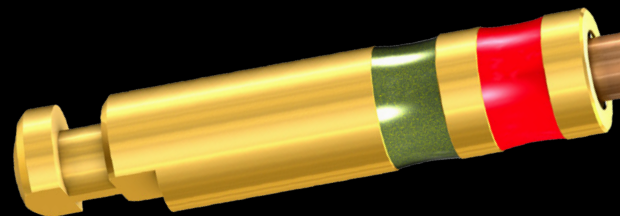

Nastavuje vyšší standardy

ve svém jádru variabilní • pro variabilní kanálky

variabilně zúžené jádro pro optimální
pracování i se zakřivenými kanálky

Q znamená teplo •

Tepelné zpracování, optimální ohebnost
a vynikající flexibilita

• hladový a efektivně řezající

rychlejší a efektivnější odstranění
díky většímu prostoru mezi břity
a dvojitě S provedení



• bezpečnější než kdy jindy

extrémně vysoká odolnost
proti cyklickému opotřebování a zlomení nástroje

• Procodile Q a vy: Vyhovuje

Ize použít ve všech běžných recipročních pohonech
perfektní v kombinaci s patentovaným pohybem ReFlex®



Základní kompetence, další rozvoj flexibility.

Tento vývoj dělá endo svět jednodušší a bezpečnější. **Procodile Q** je první tepelně zpracovaný pilník s variabilně zkoseným jádrem pilníku, pro výjimečnou flexibilitu a současně enormně efektivním odběrem substance.

Nový: Q znamená teplo.

Nový **Procodile Q** je tepelně zpracován, aby mohl ještě lépe přispět k úspěšnému endodontickému ošetření. Tepelné zpracování zajišťuje, že pilník lze předem ohýbat a zároveň poskytuje větší flexibilitu a bezpečnost při práci.

Unikátní:



Variabilně zúžené jádro nástroje


Kořenový kanálek je preparován rovnoměrně s konstantním zúžením, které umožňuje následnou homogenní obturaci. Jádro nástroje **Procodile Q** je naproti tomu variabilně zúžené. Tato konstrukční inovace znamená, že průměr jádra se směrem ke špičce zmenšuje, takže pilník je ještě hladší a přizpůsobivější.

Hladový:

Rychlejší a efektivnější ošetření

Prostor mezi bříty nástroje **Procodile Q** je zvětšen variabilně zúženým jádrem nástroje. Infikovaná tkáň je z kanálku odstraněna ještě efektivněji a je dosaženo optimální doby preparace.

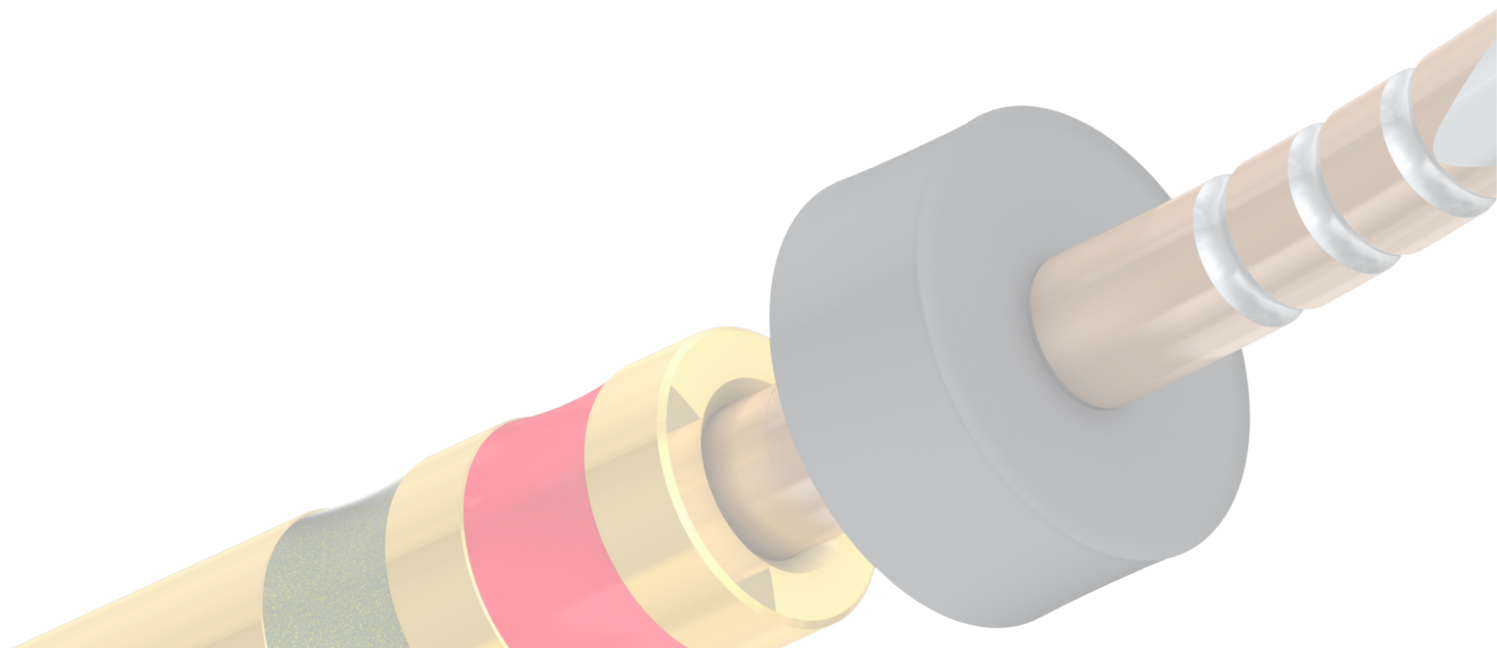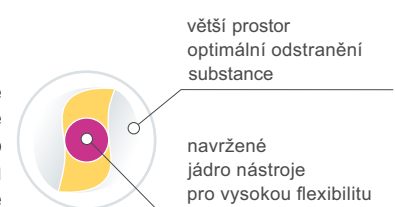


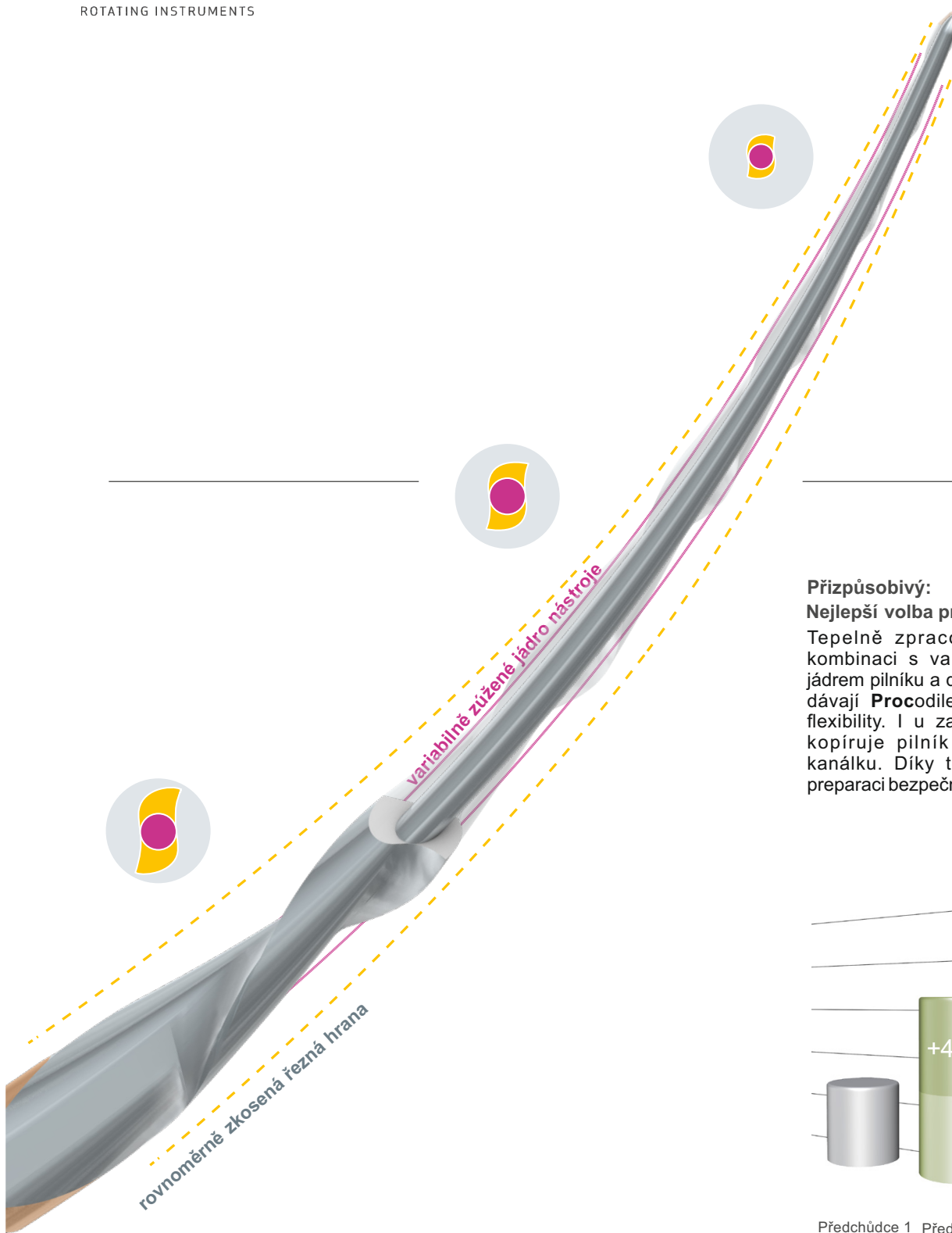

Přizpůsobivý:


Nejlepší volba pro zakřivené kanálky.

Tepelně zpracovaný materiál v kombinaci s variabilně zkoseným jádrem pilníku a dvojitým S průřezem dávají **Procodile Q** novou úroveň flexibility. I u zakřivených kanálků kopíruje pilník anatomický tvar kanálku. Díky tomu lze provádět preparaci bezpečně.

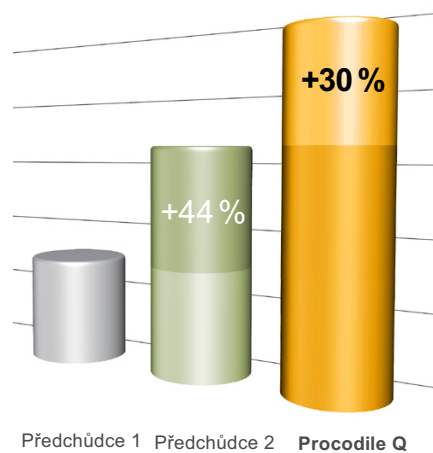

Evoluce ve flexibilitě

Procodile Q ve srovnání s předchozími nástroji na základě interního testování
Údaje jsou k dispozici

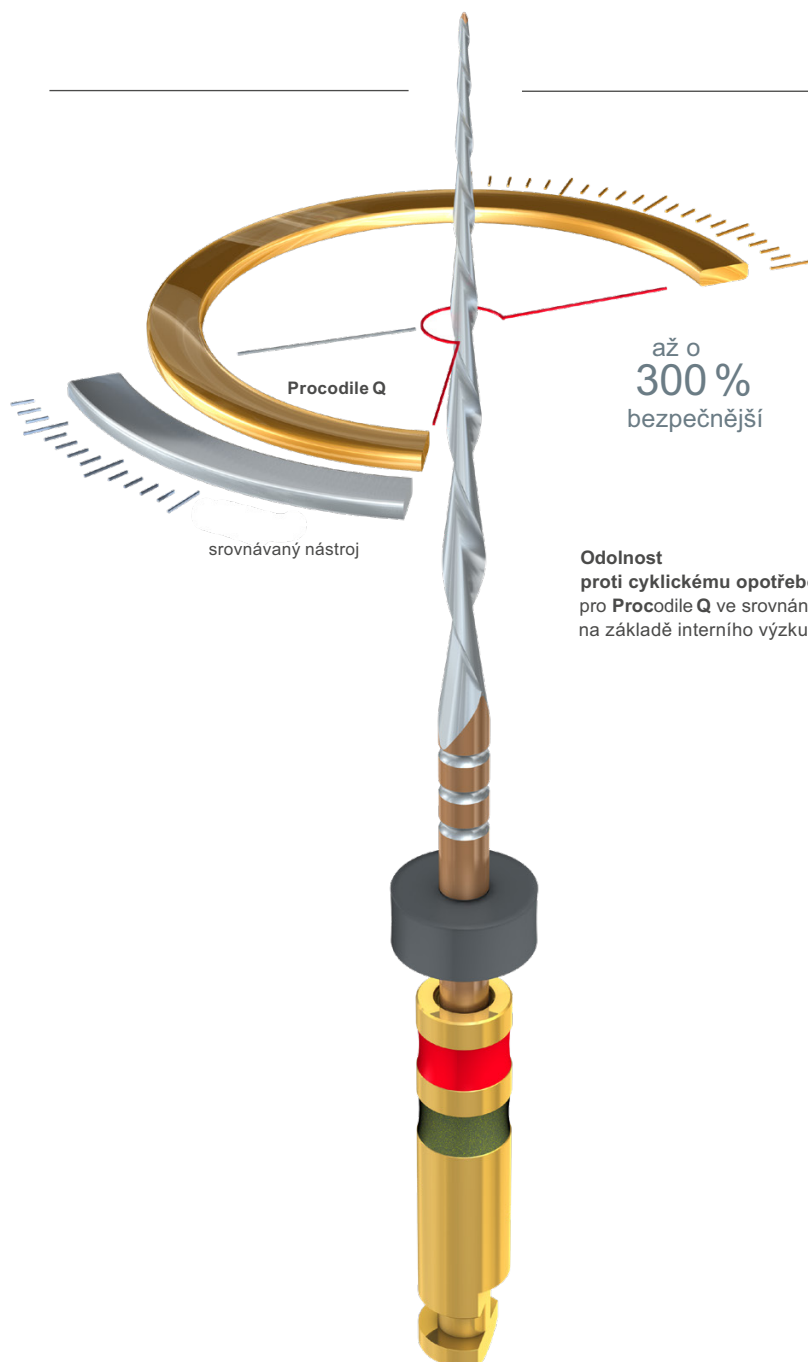

Odolný:

Zvýšená bezpečnost pro uživatele i pacienta.

Procodile Q je výrazně odolnější než jiné nástroje na trhu. Odolnost proti cyklickému opotřebování je až o 300 % vyšší než u jiných nástrojů s recipročním pohybem. To vede k výrazně nižšímu riziku zalomení nástroje.

až o
300 %
bezpečnější

Odolnost

proti cyklickému opotřebování

pro **Procodile Q** ve srovnání s předními konkurenty na základě interního výzkumu.

Inteligentní:

Nové, možnosti práce v EndoPilotu.

Nástroje **Procodile Q** jsou navrženy pro všechny běžné reciproční pohony, pro snadný a bezpečný provoz. **Procodile Q** pracuje ještě inteligentněji s ReFlex, novým, patentovaným pohybem v EndoPilotu: kombinuje výhody rotačního a recipročního pohybu pro použití s jednoduchou i složitější anatomii kanálků.

Procodile Q

Vzbuzuje nadšení



Dr. David Christofzik


Expert na endodoncii, Kiel







„Pro endodontická ošetření bych chtěl systém pilníků, který poskytuje rovnováhu mezi efektivní prací a bezpečným pocitem v úzkých a zakřivených kanálcích.

Díky tepelnému zpracování byly velmi pozitivním způsobem zrealizovány zmíněné požadavky. Tento systém je charakteristický kombinací odstraňování tkáně a zachování geometrie kanálku.”

Krok za krokem

Jednoduché a jasné. Čtyři hlavní velikosti pro přípravu úzkých středních a velkých kanálků s odpovídajícími papírovými a gutaperčovými čepy pro nejlepší možnou obturaci.

 Volba pro úzké kanálky

		
● 490 204 PRQ06 25 020	● 041 PR06 322 006 020	● 042 PR06 421 006 020
		
● 490 204 PRQ06 25 025	● 041 PR06 322 006 025	● 042 PR06 421 006 025


 Volba pro středně velké kanálky


		
● 490 204 PRQ05 25 040	● 041 PR06 322 005 040	● 042 PR06 421 005 040


 Volba pro větší kanálky

		
● 490 204 PRQ04 25 050	● 041 PR06 322 004 050	● 042 PR06 421 004 050



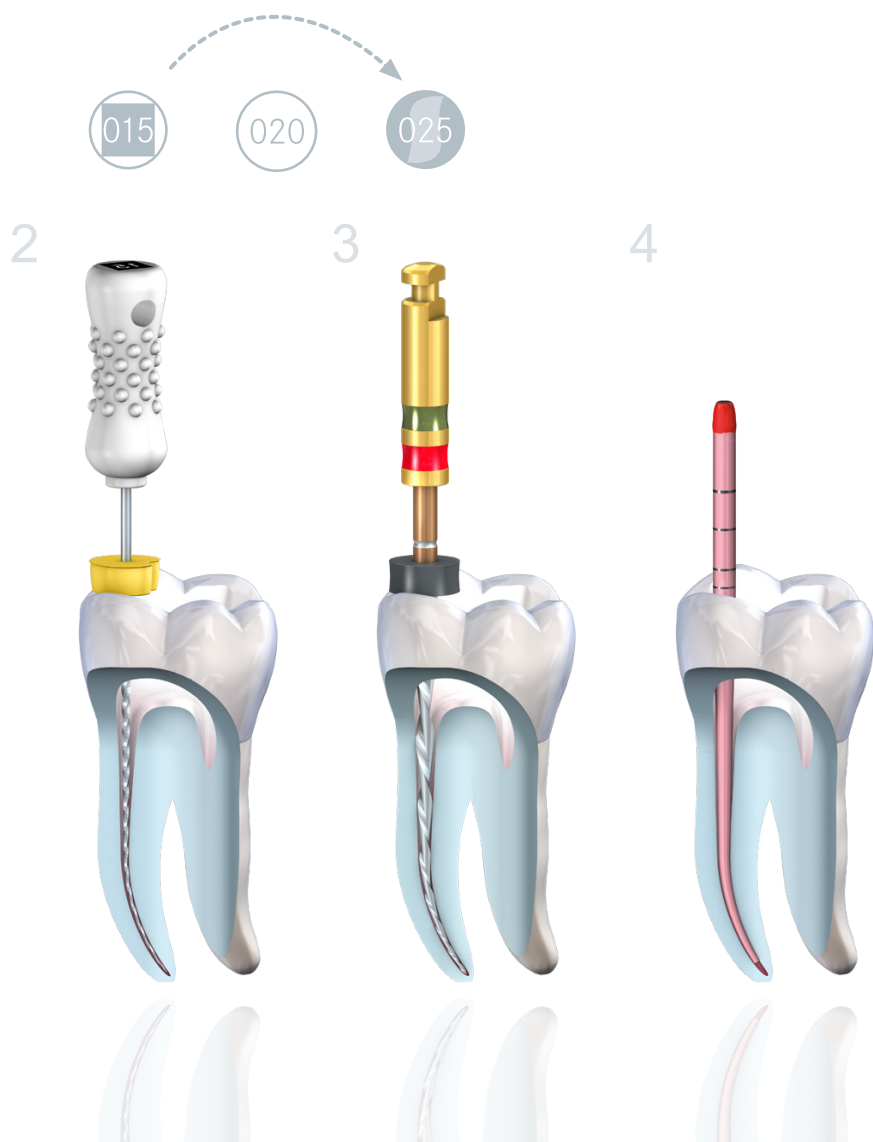


 [01] Důkladná příprava prostoru vstupu do kanálku, např. s recipročním openerem OPR08L19.

 [02] Zprůchodnění kanálku, např. s nástrojem K-pilníku o velikosti 015. Výběr vhodného nástroje Procodile závisí na dříve použité (ruční) velikosti nástroje. Pravidlo: Vynechte velikost nástroje ISO.

 [03] Příprava kanálku pomocí nástrojů Procodile.

 [04] Obturace se shodným GP čepem.

STERILE | R



Procodile Q. Příslušenství.



●● 490 204 OPR10 19 030 (7484)
reciproční opener



●● 490 204 OPR08 19 025 (7483)
reciproční opener



CeraSeal
Biokeramický kořenový výplňový materiál
700 BCS1 (8036)

EndoPilot – nyní s inteligentnějším ReFlex® pohybem

Nástroje Procodile Q jsou navrženy tak, aby fungovaly ve všech běžných pístových jednotkách pro snadný a bezpečný výkon. Procodile Q pracuje ještě inteligentněji s ReFlex, novým patentovaným pohybem v EndoPilot: kombinuje výhody rotačního a vratného pohybu pro použití s jednoduchou i složitější anatomii kanálků.



EP0014 EndoPilot
(EPDP - DownPack/EPBF - BackFill)

Procodile Q

System nástrojů a čepů

Procodile Q nástroje s kónusem .06



- 490 204 PRQ06 21 020 (F22)
- 490 204 PRQ06 25 020 (F29)
- 490 204 PRQ06 31 020 (F36)



- 490 204 PRQ06 21 025 (F23)
- 490 204 PRQ06 25 025 (F30)
- 490 204 PRQ06 31 025 (F37)



- 490 204 PRQ06 21 030 (F24)
- 490 204 PRQ06 25 030 (F31)
- 490 204 PRQ06 31 030 (F38)

Procodile Q nástroje s kónusem .05



- 490 204 PRQ05 21 035 (F25)
- 490 204 PRQ05 25 035 (F32)
- 490 204 PRQ05 31 035 (F39)



- 490 204 PRQ05 21 040 (F26)
- 490 204 PRQ05 25 040 (F33)
- 490 204 PRQ05 31 040 (F40)

Procodile Q nástroje s kónusem .04



- 490 204 PRQ04 21 045 (F27)
- 490 204 PRQ04 25 045 (F34)
- 490 204 PRQ04 31 045 (F41)



- 490 204 PRQ04 21 050 (F28)
- 490 204 PRQ04 25 050 (F35)
- 490 204 PRQ04 31 050 (F42)



Procodile papírové čepy - 60 kusů

041 PR06 322 006 S1 (7875) SADA

Obsah: 30x 025, 10x 030, 10x 035, 10x 040

jednotlivé velikosti

- 041 PR06 322 006 020 (7868)
- 041 PR06 322 006 025 (7869)
- 041 PR06 322 006 030 (7870)
- 041 PR06 322 005 035 (7871)
- 041 PR06 322 005 040 (7872)
- 041 PR06 322 004 045 (7873)
- 041 PR06 322 004 050 (7874)

Procodile Gutaperčové body

042 PR06 421 006 S1 (7849) SADA

Obsah: 30x 025, 10x 030, 10x 035, 10x 040

jednotlivé velikosti

- 042 PR06 421 006 020 (7842)
- 042 PR06 421 006 025 (7843)
- 042 PR06 421 006 030 (7844)
- 042 PR06 421 005 035 (7845)
- 042 PR06 421 005 040 (7846)
- 042 PR06 421 004 045 (7847)
- 042 PR06 421 004 050 (7848)



041 SPR06 322 006 S1 (7880)

Procodile papírové čepy,

sterilně baleno v blistrech. Balení 200 kusů.

Obsah: 120x 025, 20x 030, 20x 035, 40x 040

balení: blistr sterilně balený po 6 kusech



Scan it!

Kontakt

Telefon:

+420 388 323 991

Fax:

+420 388 320 835

Mobil:

+420 727 959 585

E-Mail:

rotadent@rotadent.eu

Facebook: Rotadent spol. s.r.o.

Instagram: rotadent_czsk

Rotadent



ROTATING INSTRUMENTS

We bring good *shapes* to life

Rotadent spol. s r.o.

Špidrova 104

Vimperk 385 01

Czech republic



Scan it!