



- Unikátní - Double-S průřez a variabilně zúžené jádro pilníku
- Q znamená teplo
- Všestranný systém

Léčba klinického případu




Kořenová výplň

FQ: Dobře promyšlený inovativní systém, který činí léčbu jednodušší, účinnější a bezpečnější. Jde o působivé all-in-one řešení, které přenáší zkušenosti firmy Komet do nové generace pilníků. Tento nový rotační nikltitanový pilník umožňuje efektivní a minimálně invazivní ošetření obtížných kořenových kanálků. Inovativní variabilně zúžené jádro pilníku má průřez **double-S** a nabízí maximální flexibilitu a vynikající rezný výkon. Předohébné pilníky se snadno řezou a poskytují příjemný a bezpečný pracovní zážitek.

Tepelně zpracovaný nikl-titan

Vyšší odolnost proti cyklické únavě minimalizuje riziko zlomení pilníku. Lepší přístup ke kořenovým kanálkům a nižší riziko zipování a výstupků, protože pilník je předem ohýbatelný a velmi flexibilní.

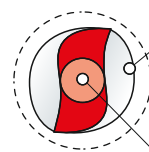

Velký prostor pro optimální odstraňování nečistot

přizpůsobené jádro nástroje pro vysokou flexibilitu

FQ opener

- Tvaruje vstup do kořenového kanálku tak, aby vytvořil ideální a rovný přístup
- Přístup k úzkým kanálkům, zejména MB2
- Snadné vytvoření přístupu do kořenového kanálku

Točivý moment 2,4 Ncm $\omega_{opt.}$ 300 rpm



● 490 204 FQ08 18 020 (F707)

FQ glider

- Efektivní a optimální vytvoření cestičky pro tvarovací pilníky
- Vytváří funkční cestu
- Oproti čistě ručnímu vytváření klouzavých drah uživatel ušetří cenný čas

Točivý moment 0,8 Ncm $\omega_{opt.}$ 300 rpm



○ 490 204 FQ03 25 015 (F708)

FQ

kónus .04

Točivý moment 1,8 Ncm $\omega_{opt.}$ 300 rpm



● 490 204 FQ04 21 020 (F709)

● 490 204 FQ04 25 020 (F710)

● 490 204 FQ04 31 020 (F711)



● 490 204 FQ04 21 025 (F712)

● 490 204 FQ04 25 025 (F713)

● 490 204 FQ04 31 025 (F714)



● 490 204 FQ04 21 030 (F715)

● 490 204 FQ04 25 030 (F716)

● 490 204 FQ04 31 030 (F717)



● 490 204 FQ04 21 035 (F718)

● 490 204 FQ04 25 035 (F719)

● 490 204 FQ04 31 035 (F720)

Točivý moment 2,4 Ncm $\omega_{opt.}$ 300 rpm



○ 490 204 FQ04 21 045 (F721)

○ 490 204 FQ04 25 045 (F722)

○ 490 204 FQ04 31 045 (F723)



● 490 204 FQ04 21 055 (F724)

● 490 204 FQ04 25 055 (F725)

● 490 204 FQ04 31 055 (F726)

FQ

kónus .06

Točivý moment 2,4 Ncm $\omega_{opt.}$ 300 rpm



● 490 204 FQ06 21 020 (F727)

● 490 204 FQ06 25 020 (F728)

● 490 204 FQ06 31 020 (F729)



● 490 204 FQ06 21 025 (F730)

● 490 204 FQ06 25 025 (F731)

● 490 204 FQ06 31 025 (F732)



● 490 204 FQ06 21 030 (F733)

● 490 204 FQ06 25 030 (F734)

● 490 204 FQ06 31 030 (F735)

Sada-FQ nástrojů

kónus .04, délka 25 mm

sada obsahuje: každý nástroj 1x

490 204 FQ04 25 AS1 (F736)



● 490 204 FQ08 18 020 (F707)



○ 490 204 FQ03 25 015 (F708)



● 490 204 FQ04 25 020 (F710)




● 490 204 FQ04 25 025 (F713)




● 490 204 FQ04 25 030 (F716)



● 490 204 FQ04 25 035 (F719)

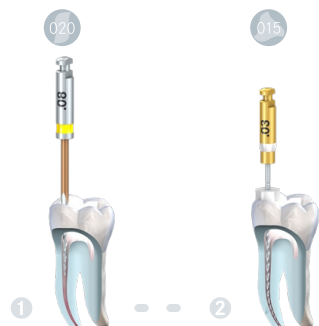

Kónus .04
pro složitější situace

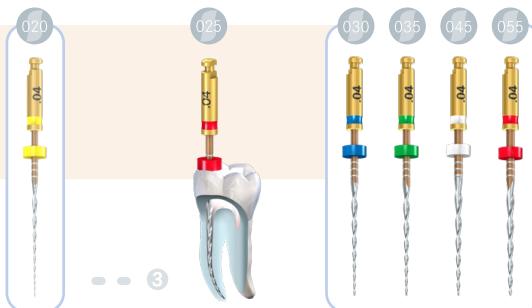

Kónus .06
pro většinu klinických případů

